


Cum sa utilizezi corect dispozitivul Breezhaler




1. Trageți capacul în sus.



2. Deschideți inhalatorul: Țineți ferm baza inhalatorului și înclinați piesa bucală. Astfel deschideți inhalatorul.

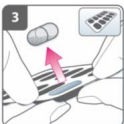


3. Pregătiți capsula: Imediat înainte de utilizare, cu mâinile uscate, scoateți o capsulă din blister.

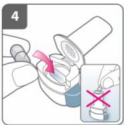

4. Introduceți capsula: Puneți capsula în locul și apăsați încet pe capsulă direct în piesa bucală.




5. Închideți inhalatorul: Închideți inhalatorul până auziți un „clic”.

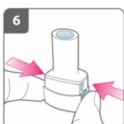

6. Străpungeți capsula: • Țineți inhalatorul drept, • Străpungeți capsula în sus până auziți un „clic” și țineți-l în poziția „clic”.



7. Eliberați complet butoanele laterale.

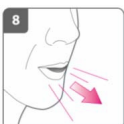

8. Expirați: Înainte de a introduce piesa bucală în gura, expirați complet.



9. Inspirați medicamentul. Pentru a inspira adânc, țineți în gura voastră dispozitivul Breezhaler. Este bine să așteptați câteva momente înainte de a inspira.




10. Notă: Pe măsură ce inspirați, informați-vă asupra presiunii din gât, buche și a bătăilor de inimă.



11. Țineți-vă respirația: După ce ați inhalat medicamentul, țineți-vă respirația cel puțin 5-10 secunde sau cât este posibil.



12. După ce ați terminat de utilizare a dispozitivului, aruncați-l în scatoare și spălați-vă mâinile cu apă caldă și săpun.

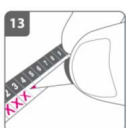

13. Marcați calendarul dozelor zilnice. Dacă există un calendar al dozelor zilnice, bifati în căsuța corespunzătoare zilei.